



Компанія OrtoMed Holding

Один з найбільших оптових постачальників ортопедичної продукції та продукції для реабілітації в Україні.

Ортопедичні устілки OrtoMed «Легкою ходьбою – тільки вперед!»

ВИРОБНИК:

HEMA Orthopädische Systeme GmbH, Німеччина



Місія:

Оздоровлення української нації через забезпечення максимально ефективними та доступними медичними товарами для реабілітації та ортопедії, які відповідають найвищим міжнародним стандартам якості

Цінності:

Постійне прагнення до розвитку

Відповідність потребам ринку та клієнтоорієнтованість

Індивідуальний підхід

Дотримання ділової етики та професіоналізм команди

Чесність у співпраці





ORTOMED
HOLDING

ОРТОПЕДИЧНІ УСТІЛКИ ORTOMED ЦЕ:



Преміальна якість за
доступною ціною



Ортопедичні
елементи в кожному
розмірі устілки



Забезпечують
фізіологічно
правильне положення
стопи

Устілки OrtoMed – це

Німецькі матеріали, технології та виробництво

Найкраще співвідношення «ціна-якість»

Оптимальний асортимент

Устілки для будь-яких потреб: лікування, профілактика та заняття спортом



БУДОВА СТОПИ

П'ятковий відділ стопи

Передплюсневі кістки

Центральний відділ стопи

Плюсневі кістки

Поперечне склепіння

Поздовжнє склепіння

Передній відділ стопи

Фаланги пальців



БУДОВА СТОПИ



Підошовна фасція


П'яткова кістка

ФУНКЦІЇ СТОПИ

Опорна



ORTOMED
HOLDING

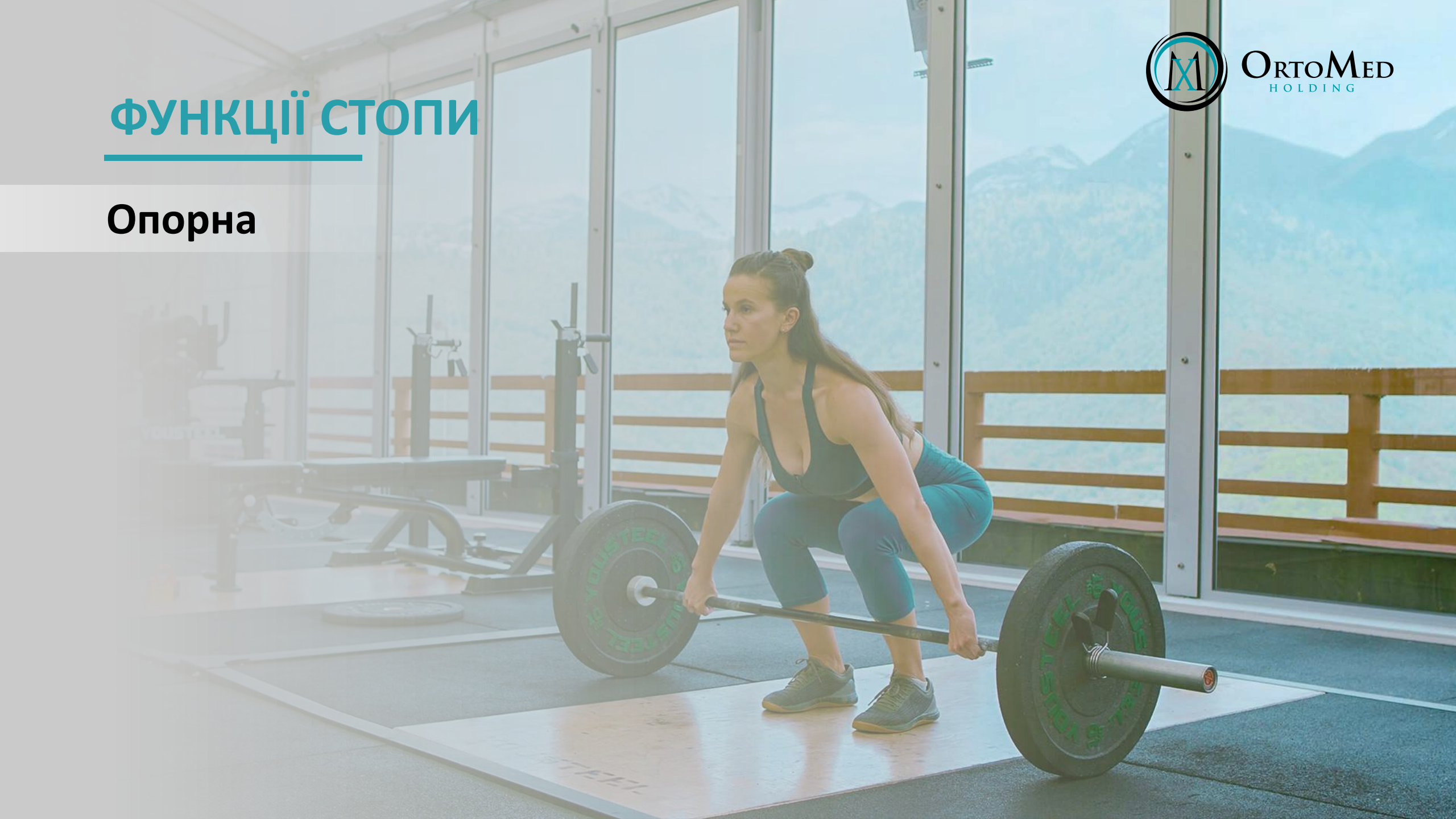

ФУНКЦІЇ СТОПИ

ПОШТОВХОВА



ORTOMED
HOLDING


ФУНКЦІЇ СТОПИ

Ресорна



ФУНКЦІЇ СТОПИ

Балансувальна

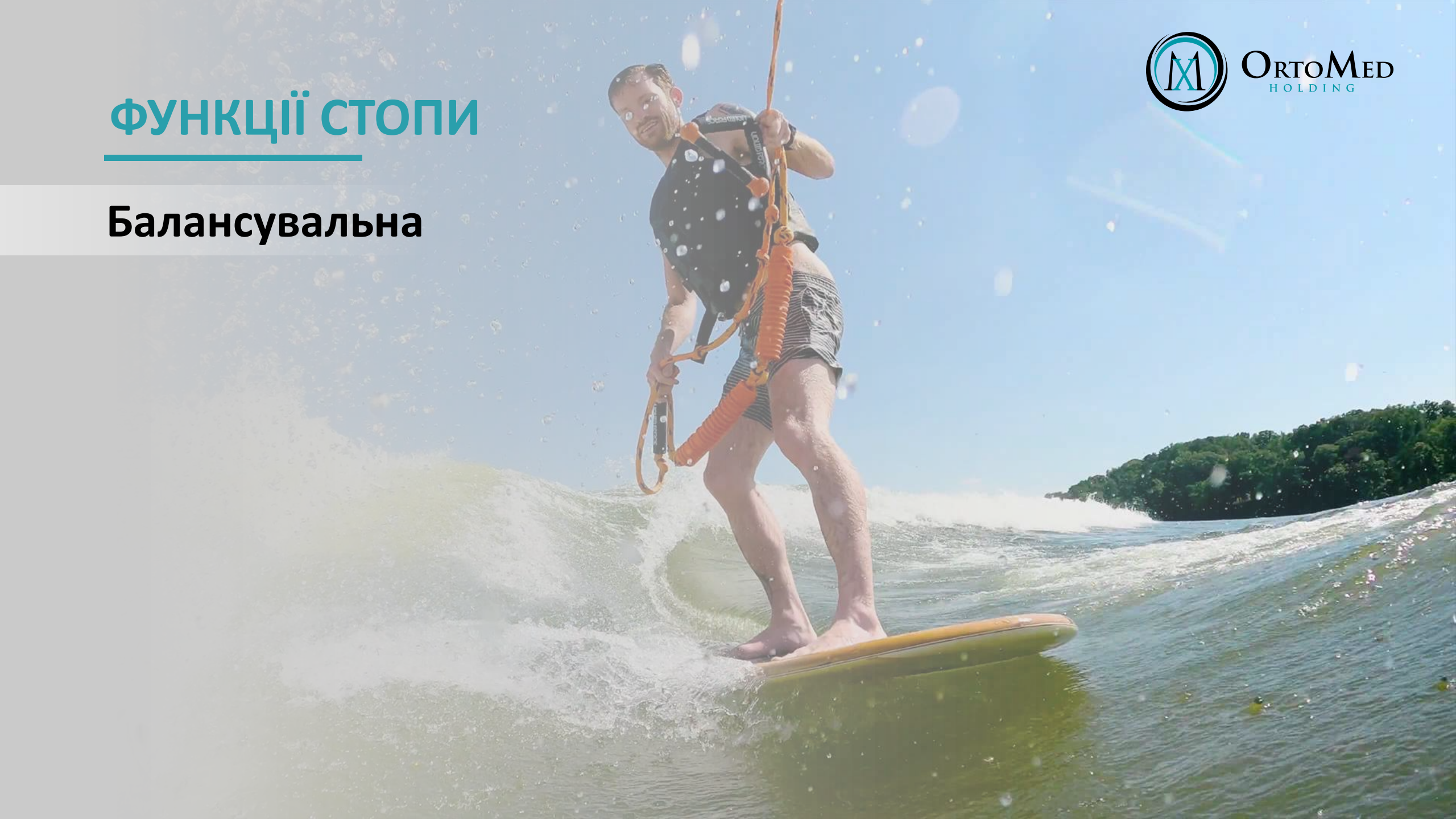

Як змінюється стопа з віком?



0 років

Народження дитини з
плоскою стопою



До 1,5 років

Клишоногість - варусна
постанова стопи



3 роки

З'являються склепіння стопи



4-5 років

Вальгусна постанова стопи



5-7 років

Кінцеве формування
склепінь стопи



7-13 років

Ризик появи перших деформацій
поздовжнього склепіння стопи.
Причина: не зручне взуття, зниження
фізичної активності.



13-18 років

Активне формування скелету, ріст кісток
Ризик появи поперечної плоскостопості.
Причина: не зручне взуття, взуття на
підборах.



Після 40 років

Поява комбінованої плоскостопості.
Зменшення кількості хрящів,
збільшення частки кісткової
тканини.

Фактори ризику

Робота стоячи більше 4 годин на день

Взуття на підборах вище 5 см

Дуже вузьке взуття

Надмірна вага та навантаження в спорті

Вагітність

Малорухливий спосіб життя

Травми стопи

Системні захворювання



Захворювання переднього відділу стопи



Поперечна плоскостопість



Hallux Valgus



Натоптиш



Деформації
пальців стопи



Синдром діабетичної
стопи



Деформація Тейлора



Неврома Мортона

Захворювання центрального відділу стопи

Поздовжня плоскостопість

Плоско-вальгусна деформація

Варус стопи




Немає
плоскостопості



I ступінь
плоскостопості



II ступінь
плоскостопості

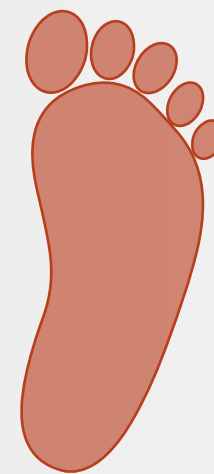

III ступінь
плоскостопості



ORTOMED
HOLDING

Захворювання п'яtkового відділу стопи

Плантарний фасциїт/п'яtkова шпора

Хвороба Хаглунда



Підошовна фасція

П'яtkова шпора

КЛАСИФІКАЦІЯ ОРТОПЕДИЧНИХ УСТІЛОК



- Дорослі
- Дитячі



- Жорсткі
- М'які



- Лікувальні
- Лікувально-профілактичні

ДІАГНОСТИКА СТОП

Клієнт знає, що в нього є деформація стопи

Жаліється на біль та втому в ногах

Звернувся з проблемою патології суглобів нижніх кінцівок або хребта

Звернувся з проблемою варикозного розширення вен/за компресійним трикотажем

Самостійна діагностика – запропонувати в домашніх умовах провести самодіагностику


Диференційна діагностика фіксованої та нефіксованої деформації



Як правильно підібрати устілку?

1. Викладіть аркуш паперу на твердій поверхні.
Обведіть контур стопи олівцем, суворо тримаючи його вертикально.
2. Виділіть найбільш виступаючі точки переднього відділу всередині та зовні – з'єднайте їх
3. З'єднайте середину цієї лінії з найбільш віддаленою точкою в області п'яти
4. Підберіть устілку згідно малюнка
5. Зробіть примірку

Розмір устілки підбирається за розміром стопи, а не взуття

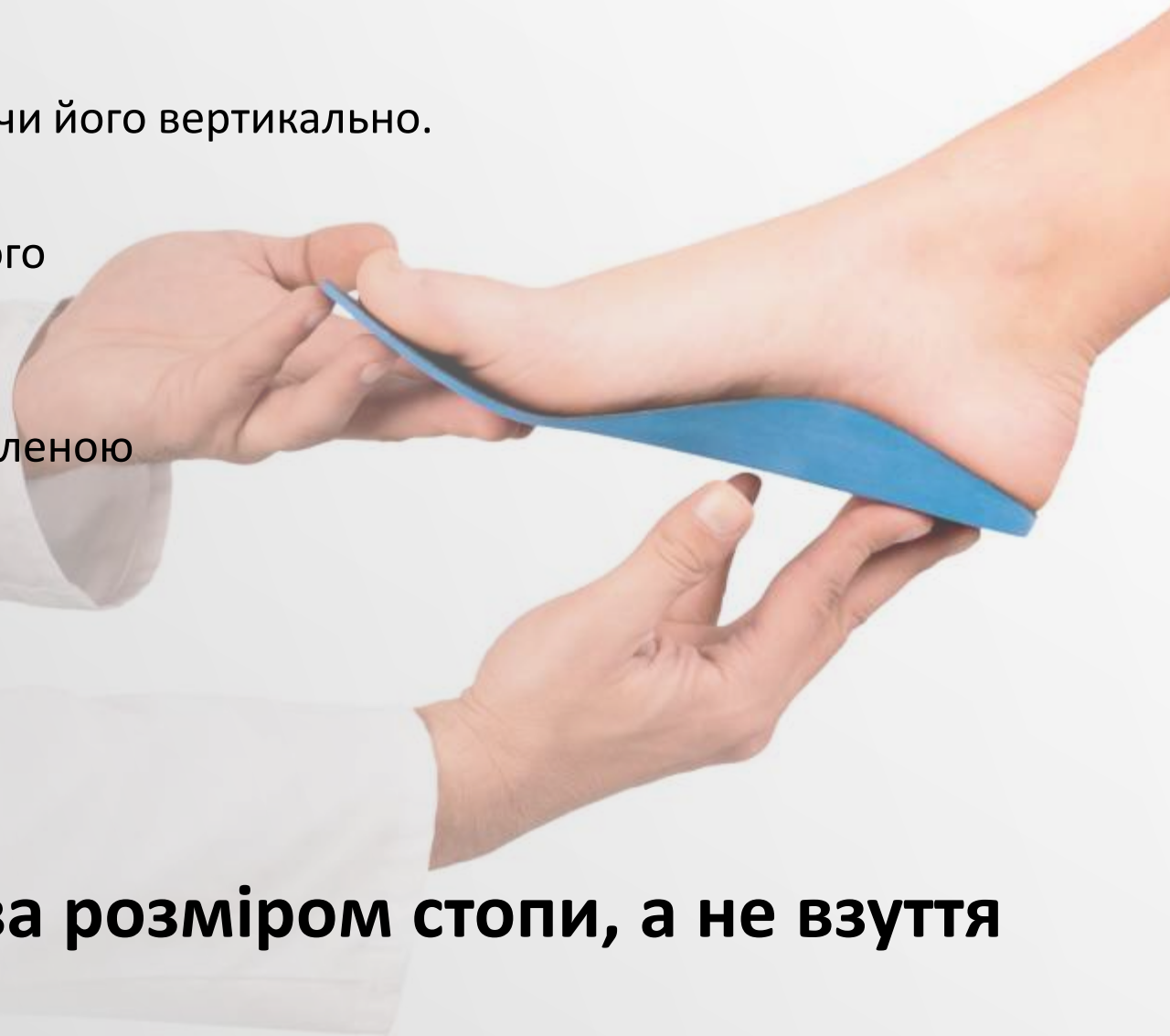

ЛІНІЙКИ ОРТОПЕДИЧНИХ УСТІЛОК



STANDART

Жорсткі, лікувально-профілактичні, без п'яtkового бортика, тоненькі (2мм), тільки для нефіксованих деформацій стопи



PRO

М'які, лікувальні, тільки для фіксованих деформацій стопи, вирішують найбільший спектр проблем стопи



SPORT

М'які, лікувально-профілактичні, з додатковими зонами розвантаження, для значних навантажень, занять спортом



KIDS

Жорсткі, лікувальні

Ортопедичні устілки-супінатори

 OMS-125/126

STANDART

Розміри:


♀ Жіноча 35-42

♂ Чоловіча 38-47



OMS-125/126

- ① **ПОКРИТТЯ: гладенька перфорована замша**
Поглинає надлишкову вологу
- ② **ВАЛИК ЗЕЙЦА: з м'якої піни**
Підтримує поперечний звід стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- ③ **КАРКАС: анатомічний, жорсткість 30-35° за Шором**
Оптимальна підтримка стоп та розподіл тиску при щоденних навантаженнях на кінцівки та хребет. Розвантажує м'язи гомілки та ахіллове сухожилля
- ④ **ОСНОВА: 2 мм, армування клін-Plex екологічна дихаюча без розвантаження п'ятки**
Зменшує навантаження на суглоби ніг і хребет
- ⑤ **НИЖНЯ ЧАСТИНА: пробкова основа, Thermosoft**
Екологічний дихаючий матеріал

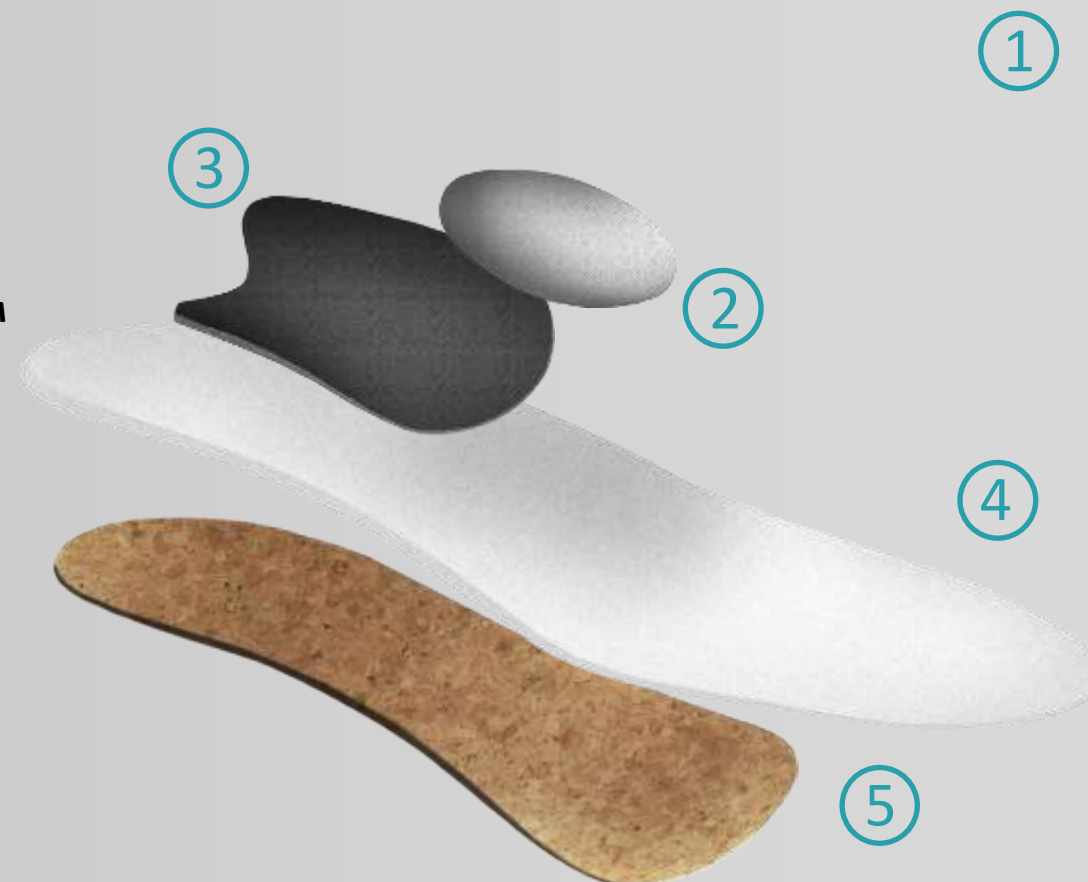

Виготовлена повністю з натуральних матеріалів. Для людей 25-40 років

OMS-125/126

ПОКАЗАННЯ:

Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована
плоскостопість II ступеня

Hallux Valgus («кісточка»)

Вальгус стопи

Метатарзалгії

Деформація Тейлора (5го пальця стопи)

Неврома Мортона

Захворювання хребта

Реабілітація після травм та оперативних втручань на
нижніх кінцівках




Ортопедичні устілки-супінатори

 OMS-805

STANDART

Розміри: 35-46

  Унісекс

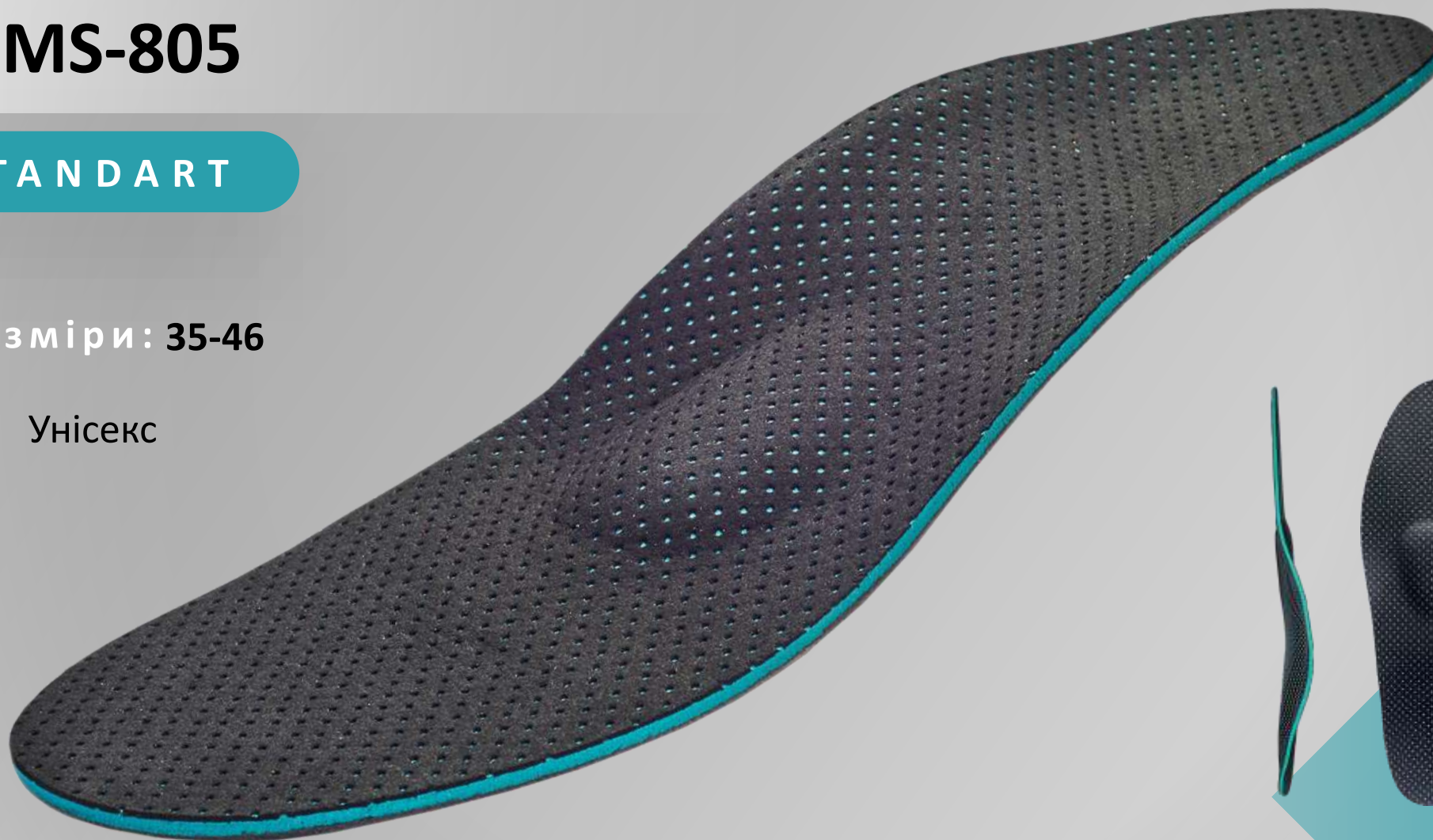

OMS-805

1

ПОКРИТТЯ: перфорований мікрофазер чорного кольору, антибактеріальний

Повітропроникний матеріал добре відводить вологу, має протиковзкий ефект

2

ВАЛИК ЗЕЙЦА: з м'якої піни

Підтримка поперечного зводу стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи

3

КАРКАС: жорсткий, анатомічний НЕМА-Plex без п'яти, жорсткість 20°

Підтримка поздовжніх зводів стопи при щоденних навантаженнях.

Розвантажує м'язи гомілки, ахіллове сухожилля, п'ятки

4


ОСНОВА: 2 мм, світло-зелений Thermosoft

Зменшує навантаження на суглоби ніг і хребет

5

НИЖНЯ ЧАСТИНА: «срібло-полярна ніч»

Має протиковзкий ефект, має властивості термoeфекту та високу зносостійкість

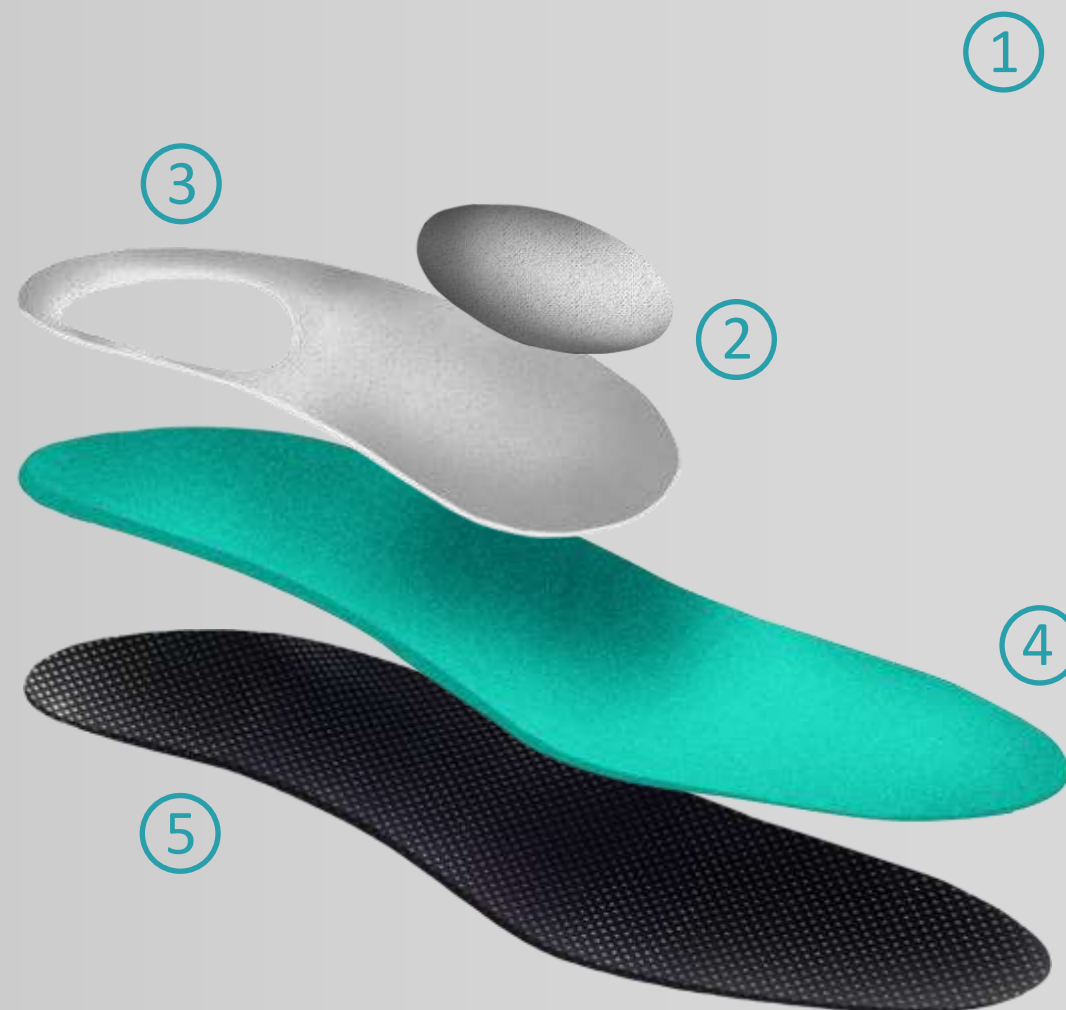



OMS-805

ПОКАЗАННЯ:

Hallux Valgus («кісточка») та вальгус стопи

Метатарзалгії

Деформація Тейлора (5го пальця стопи)

Плантарний фасциїт легкого ступеня

Молоткоподібні деформації пальців

Неврома Мортона, захворювання хребта

Початкові болі в п'ятці

Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках

Для людей молодшого та середнього віку (30-50 років)



Ортопедичні устілки-супінатори

 **OMS-806**

STANDART


Розміри: **38-48**

  Унісекс



OMS-806

- 1 ПOKPИTTЯ: натуральна перфорована шкіра**
Адаптується під стопу та не промокає, має високу зносостійкість
- 2 ВАЛИК ЗЕЙЦА: з м'якої піни**
Підтримує поперечний звід стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- 3 КАРКАС: анатомічний НЕМА-Plex, жорсткість 25-30°**
Оптимальна підтримка поздовжніх зводів стопи при щоденних навантаженнях. Розвантажує м'язи гомілки, ахіллове сухожилля, п'ятки
- 4 ОСНОВА: 2мм білий Thermosoft гладкий EVA-матеріал**
Амортизує та зменшує навантаження на суглоби ніг і хребет
- 5 НИЖНЯ ЧАСТИНА: Paraskin на всю довжину**
Адаптується під стопу, не промокає, має високу зносостійкість

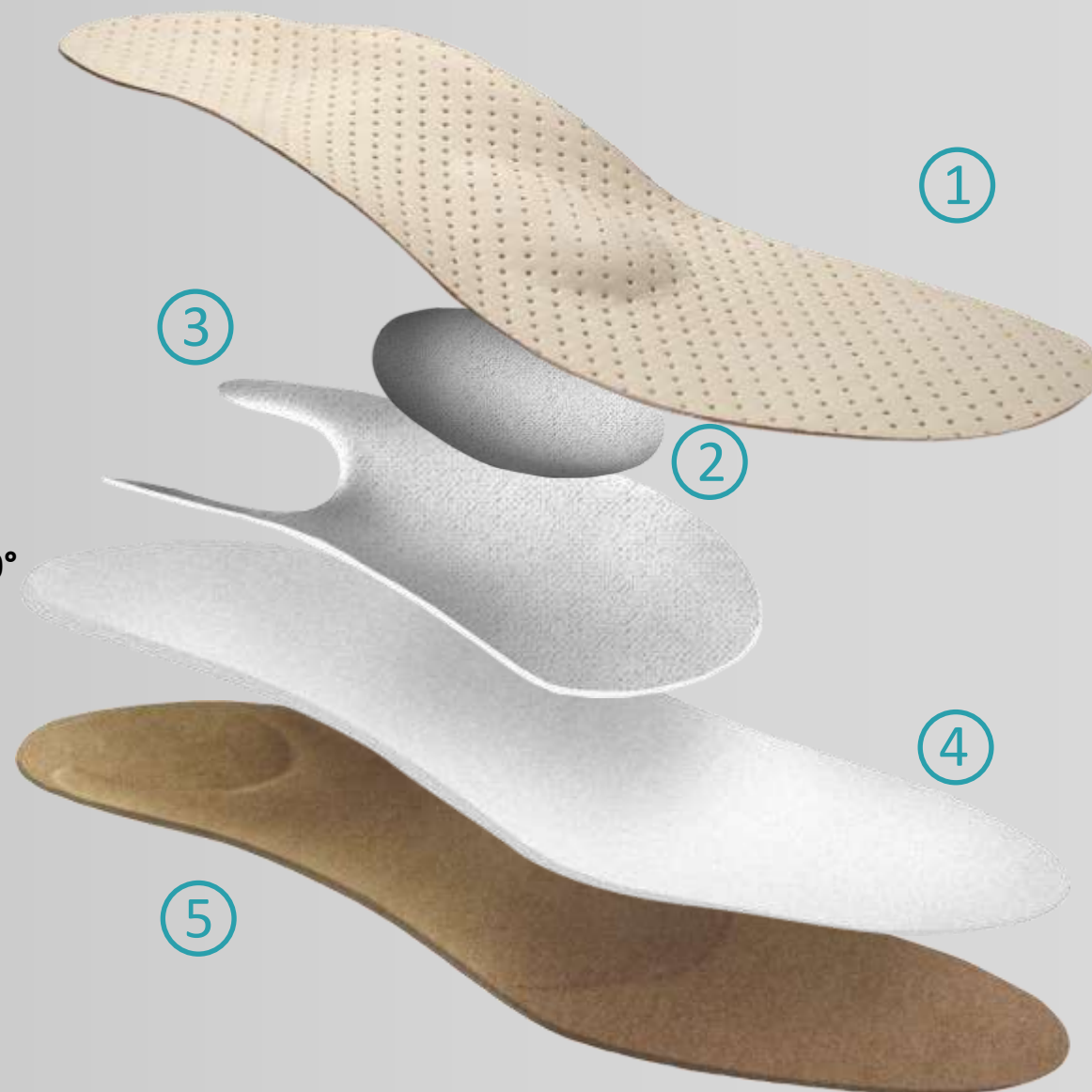



OMS-806

ПОКАЗАННЯ:

Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована
плоскостопість II ступеня

Hallux Valgus («кісточка») та вальгус стопи

Молоткоподібні деформації пальців

Плантарний фасциїт легкого ступеня

Деформація Тейлора (5го пальця стопи)

Неврома Мортона та метатарзалгії

Початкові болі в п'ятці

Реабілітація після травм та оперативних втручань на
нижніх кінцівках, захворювання хребта

Для людей молодшого та середнього віку (30-50 років)




Ортопедичні устілки-супінатори

 OMS-102

STANDART


Розміри: 36-46

  Унісекс

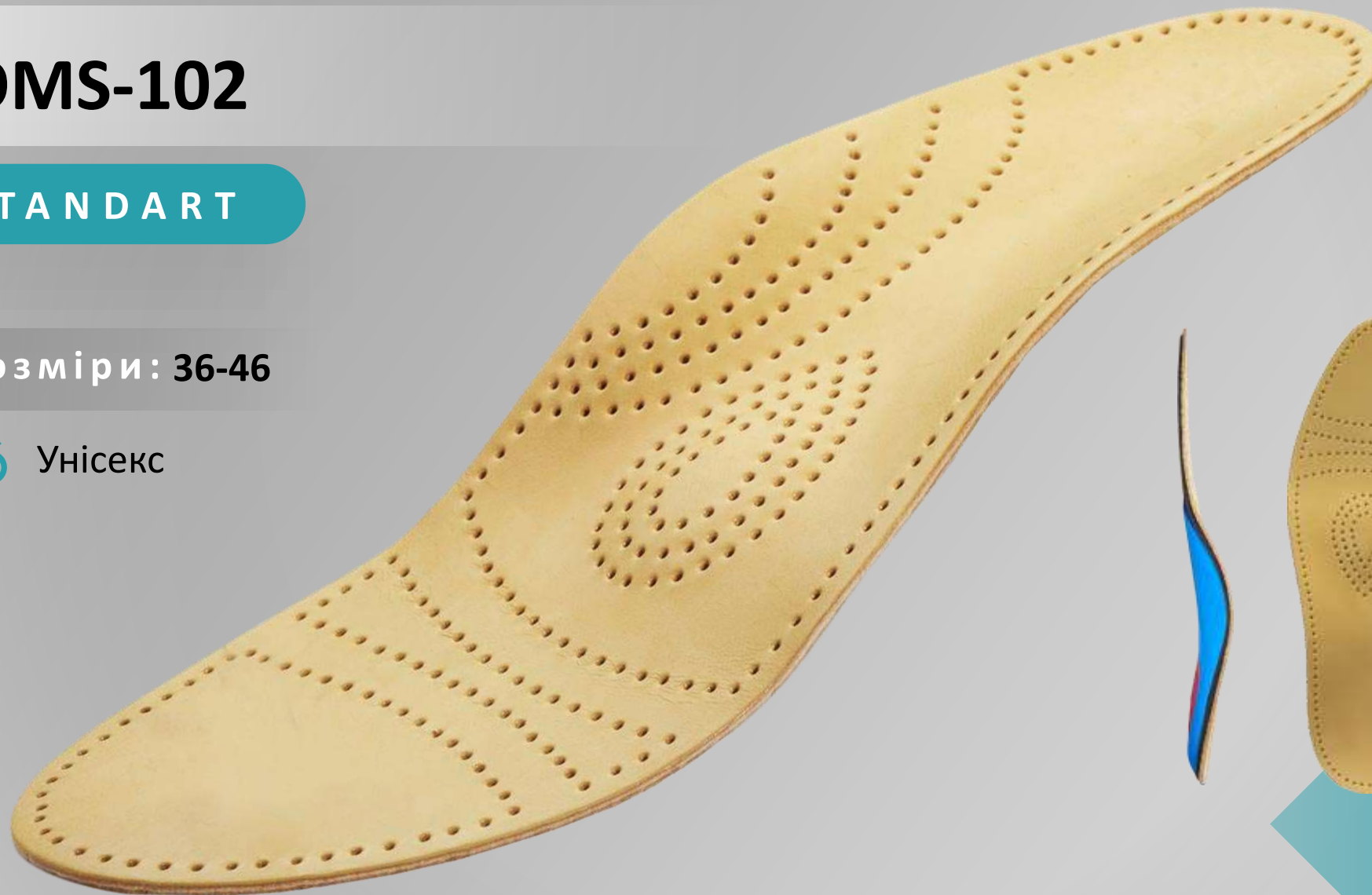

OMS-102

- ① **ПОКРИТТЯ: натуральна перфорована шкіра**
Відводить вологу, пропускає повітря, має протиковзкий ефект
- ② **ВАЛИК ЗЕЙЦА: з м'якої піни, не виражений**
Підтримує поперечний звід стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- ③ **ОСНОВА: міжустілковий прошарок - спінений матеріал з додаванням вугілля**
Нейтралізує запах, зменшує вологість у взутті, має антибактеріальну та протигрибкову дію
- ④ **П'ЯТКОВИЙ АМОРТИЗАТОР: краплеподібної форми, має збільшену площу контакту**
Зменшує ударне навантаження на п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет
- ⑤ **КАРКАС: тонкий, анатомічний, пружно-амортизаційний**
Підтримує поздовжні зводи стопи при щоденних навантаженнях. Розвантажує м'язи, зв'язки і сухожилля стопи. Для людей вагою до 85 кг.

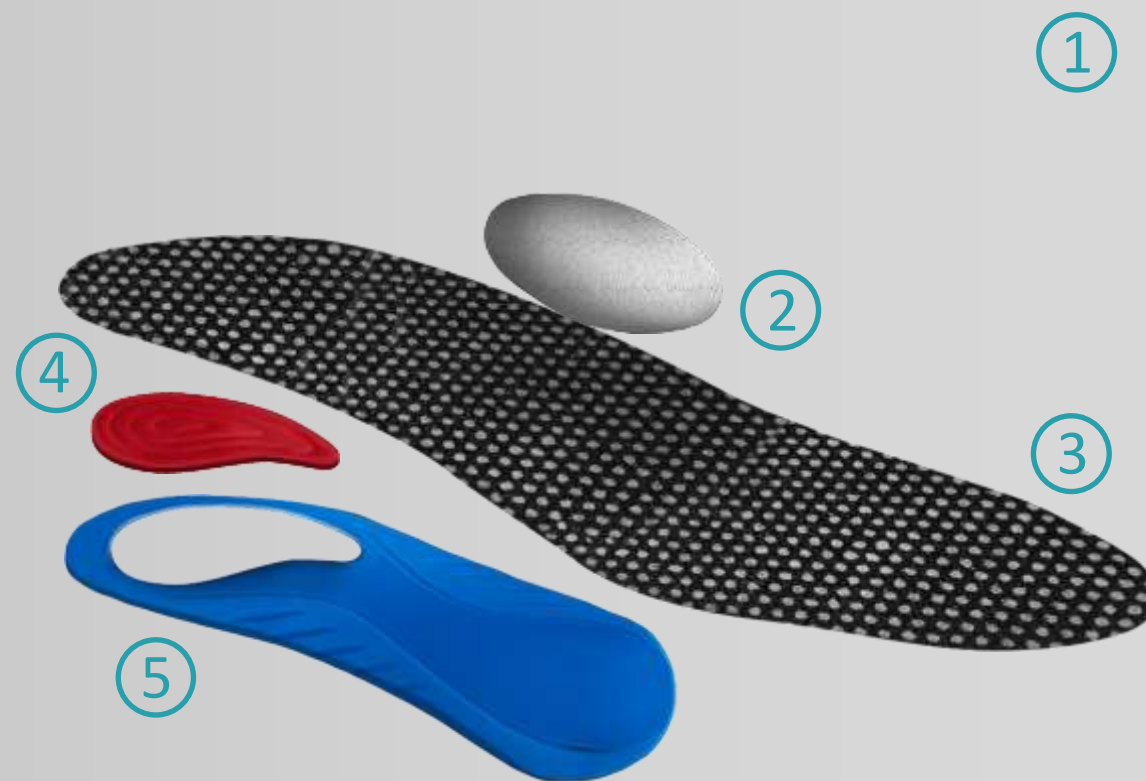



OMS-102

ПОКАЗАННЯ:

Статичні нефіксовані деформації стопи: подовжня, поперечна і комбінована плоскостопість I-II ступеня

Плантарний фасциїт легкого ступеня

Метатарзалгії різної етіології

Центральна та бокова п'яткова шпора

Артрозо-артрити суглобів стоп

Варикозна хвороба

Надмірна вага та вагітність

Тривале перебування на ногах



Ортопедичні устілки-супінатори

 OMS-103

STANDART

Розміри: 36-46

  Унісекс



OMS-103

1

ПОКРИТТЯ: покриття «On Steam» - «дихаючий» матеріал, який має властивості натуральної шкіри і мікрофібри

Має теплорегулюючі властивості, що забезпечує комфорт і сухість всередині взуття, допомагає уникнути неприємних запахів

2

ВАЛИК ЗЕЙЦА

З м'якої піни, не виражений. Зменшує втому стопи і створює комфортні умови при ходьбі

3

ОСНОВА: чорний латекс

4


П'ЯТКОВИЙ АМОРТИЗАТОР: краплеподібної форми, має збільшену площу контакту

Зменшує ударне навантаження на п'яти, суглоби нижніх кінцівок і хребет

5

КАРКАС: тонкий, анатомічний, пружно-амортизаційний

Підтримує поздовжні зводи стопи при щоденних навантаженнях. Розвантажує м'язи, зв'язки і сухожилля стопи. Для людей вагою до 85 кг.

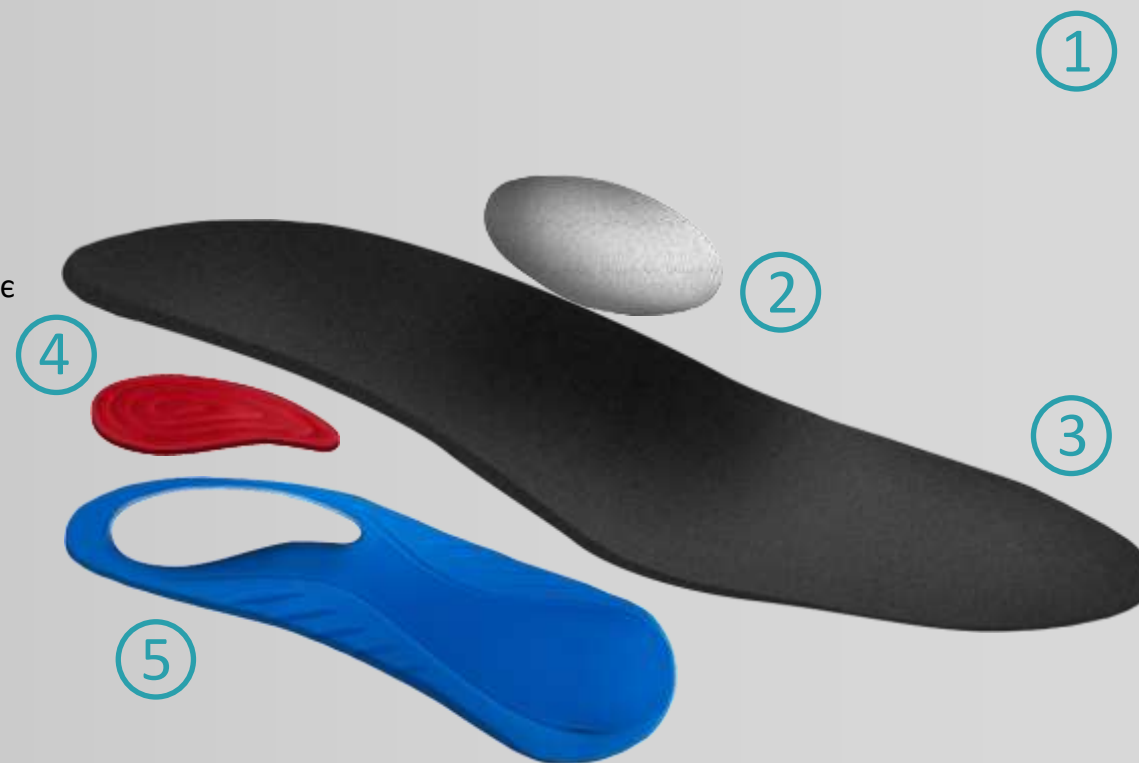

OMS-103

ПОКАЗАННЯ:

Статичні нефіксовані деформації стопи: подовжня, поперечна і комбінована плоскостопість I-II ступеня

Плантарний фасциїт легкого ступеня

Метатарзалгії різної етіології

Центральна та бокова п'яткова шпора

Артрозо-артрити суглобів стоп

Вальгус стопи

Надмірна вага, вагітність, варикозна хвороба

Тривале перебування на ногах



Ортопедичні устілки-супінатори

 OMS-817

STANDART


Розміри: 35-48

♀ ♂ Унісекс



OMS-817

- ① **ПОКРИТТЯ: мікрофібра «On Steam»**
Має терморегулюючі властивості, що забезпечує комфорт і сухість всередині взуття, допомагає уникнути неприємних запахів
- ② **ВАЛИК ЗЕЙЦА**
З м'якої піни, не виражений. Зменшує втому стопи і створює комфортні умови при ходьбі
- ③ **Каркас - НЕМА-Plex без задньої підтримки (без п'ятки)**
- ④ **Прошарок - PPX Dia Salmone 3 мм**
Зменшує навантаження на суглоби ніг і хребет. Матеріал більш стійкий до просідання, висока зносостійкість та еластичність.
- ⑤ **Основа - імітаційне вуглецеве волокно (імітація карбону)**

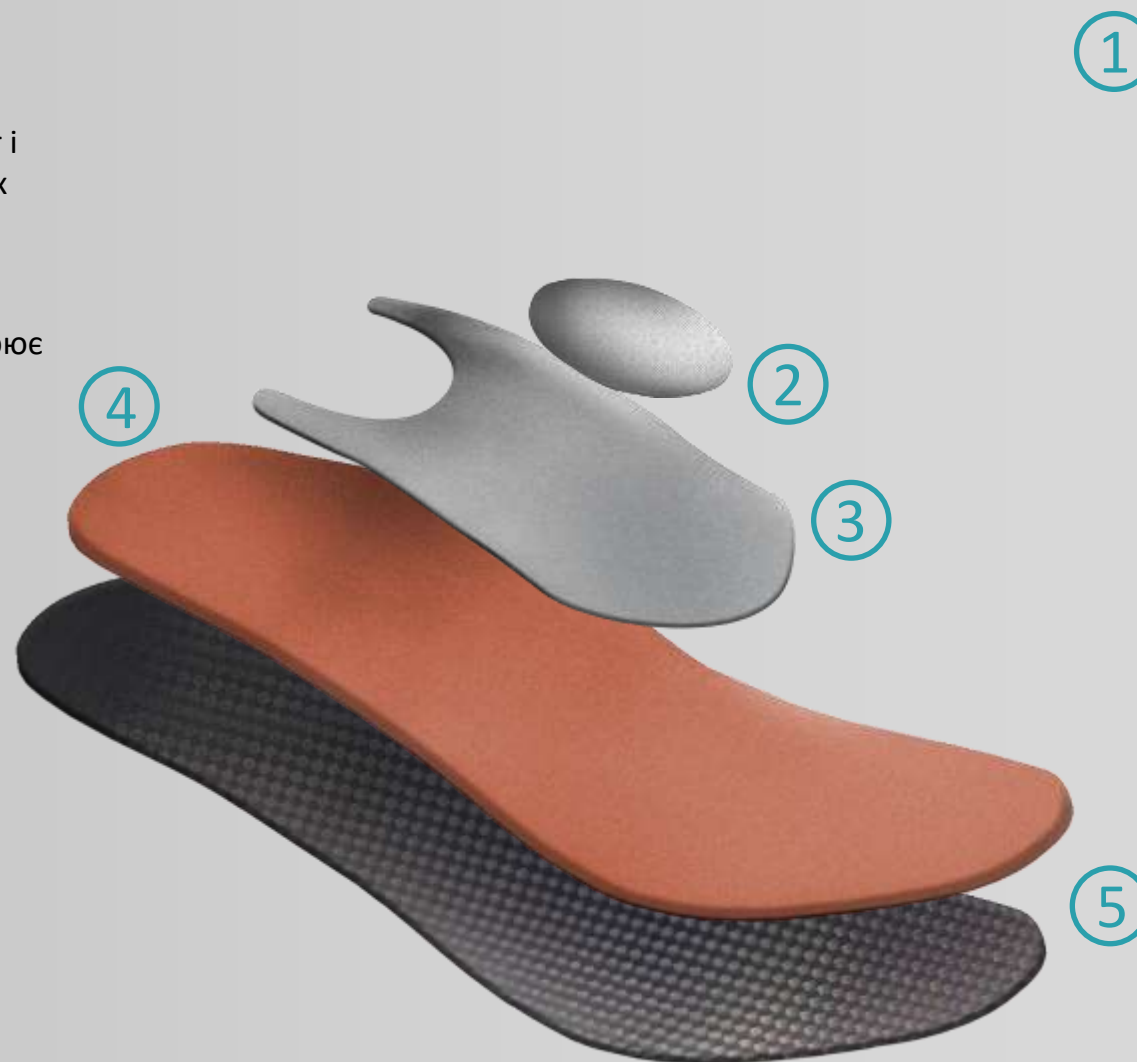



OMS-817

ПОКАЗАННЯ:

Статичні нефіксовані деформації стопи: подовжня, поперечна і комбінована плоскостопість I-II ступеня


Метатарзалгії різної етіології

Артрозо-артрити суглобів стоп

Травми та захворювання м'язів гомілки та ахіллового сухожилля

Реабілітація після травм та оперативних втручань

Підвищене навантаження на нижні кінцівки

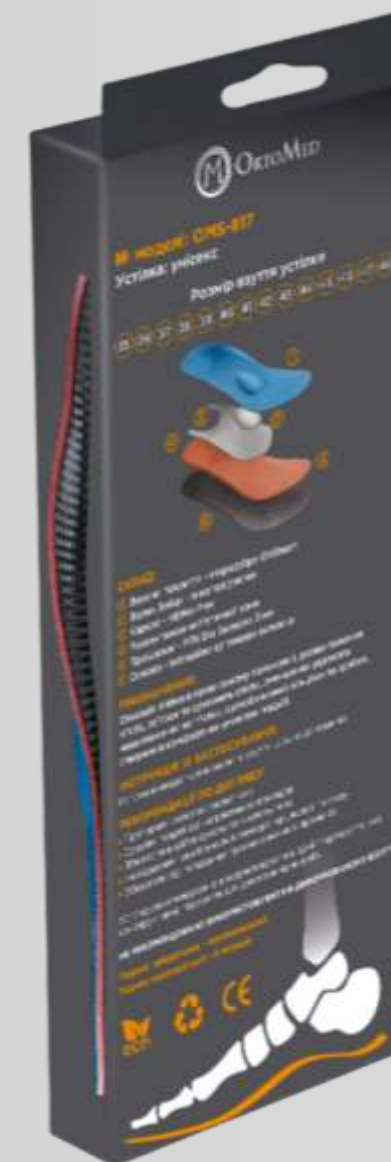

Устілки ортопедичні з п'яточним амортизатором ПРЕМІУМ

 **OMP-269/262**

PRO

Розміри:


♀ Жіноча 34-40

♂ Чоловіча 40-48



OMP-269/262

- 1 **ПОКРИТТЯ: мікрофазер перфорований чорного кольору, антибактеріальний**
Вбирає зайву вологу, приємне до шкіри
- 2 **ВАЛИК ЗЕЙЦА: з м'якої піни**
Підтримує поперечний звід стопи, запобігає утворенню плоскостопості, полегшує її симптоми
- 3 **ПОСИЛЮВАЧ КАРКАСУ: антрацит 2 мм**
Додає додаткову пружність та зносостійкість
- 4 **ДОДАТКОВИЙ П'ЯТКОВИЙ АМОРТИЗАТОР: 6 мм максимально краплеподібної форми зі збільшеною площею контакту**
Ефективно знижує ударне навантаження на п'яти
- 5 **БУФЕР ДЛЯ П'ЯТКОВОЇ ШПОРИ**
Розвантажує п'яту, кістку п'яти, п'яткову шпору і пом'якшує навантаження
- 6 **КАРКАС: без п'яtkового бортика, жорсткий, 2 мм, анатомічний, білий Synchro flex, жорсткість 20°**
Максимально відтворює амортизаційні властивості стопи. Ефективно підтримує поздовжній звід стопи і запобігає втомі ніг
- 7 **ОСНОВА: 2 мм, жовтий Thermosoft**
Амортизує та зменшує навантаження на суглоби ніг і хребет
- 8 **ПІДП'ЯТОЧНИК: XRD 6 мм**
- 9 **НИЖНЯ ЧАСТИНА: карбонова імітація чорного кольору**

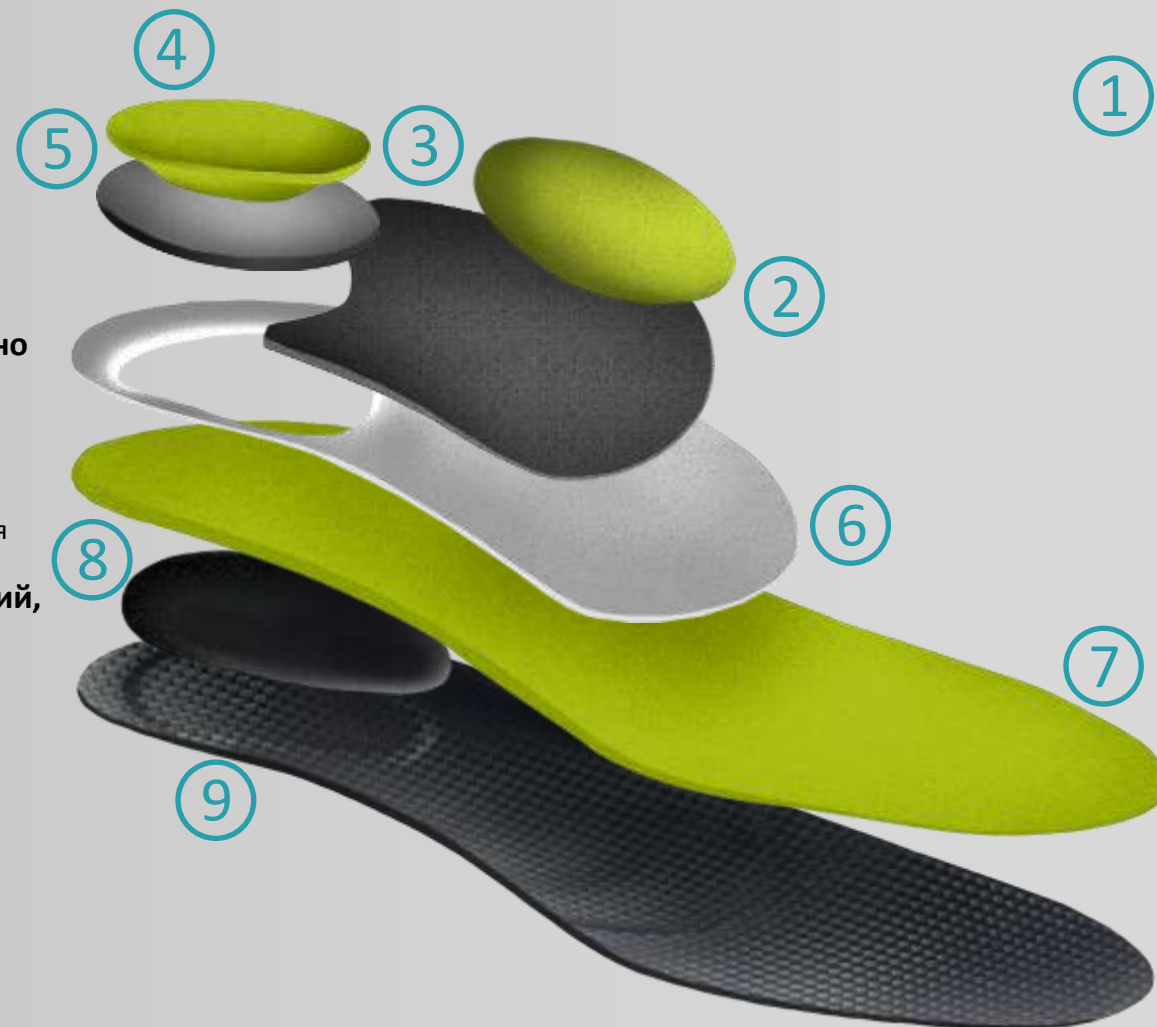



OMP-269/262

ПОКАЗАННЯ:

Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня

Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня

Hallux Valgus («кісточка»), вальгус стопи та метатарзалгії

Плантарний фасциїт, центральна та бокова п'яткова шпора та артрит

Молоткоподібні деформації пальців та ахілобурсит

Деформація Тейлора, неврома Мортонна та хвороба Хагlundа

Артрози, захворювання хребта, цукровий діабет

Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках




Устілки ортопедичні м'які амортизуючі ПРЕМІУМ

 **OMP-961**

PRO


Розміри: 35-48

  Унісекс

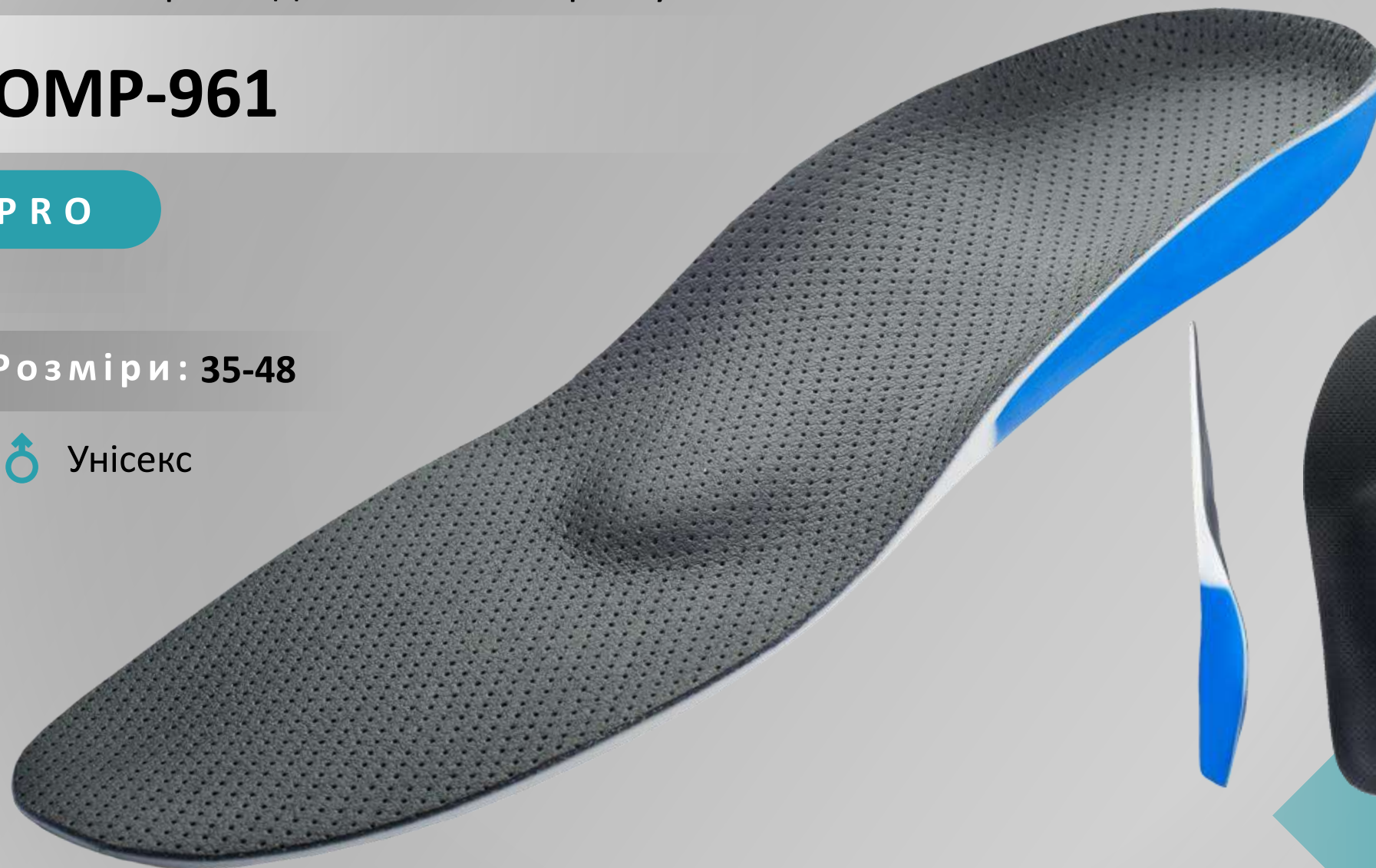

OMP-961

- ① **ПОКРИТТЯ: on Steam® темно-сірий перфорований**
Запатентований матеріал, має властивості натуральної шкіри та мікрофібри. 100% дихаюче мікроволокно, вбирає вологу. Має теплорегулюючі характеристики, максимальний комфорт та сухість всередині взуття
- ② **ВАЛИК ЗЕЙЦА: м'який, менш виражений, пінополіуретан**
Підтримка поперечного зводу стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- ③ **Пронатор поздовжнього зводу стопи**
- ④ **П'ятковий амортизатор**
- ⑤ **ОСНОВА: безкаркасна, 2-х компонентна підошва з поліуретану, з п'ятковим бортиком**
Має теплорегулюючі характеристики, максимальний комфорт та сухість всередині взуття. Усуває неприємні запахи

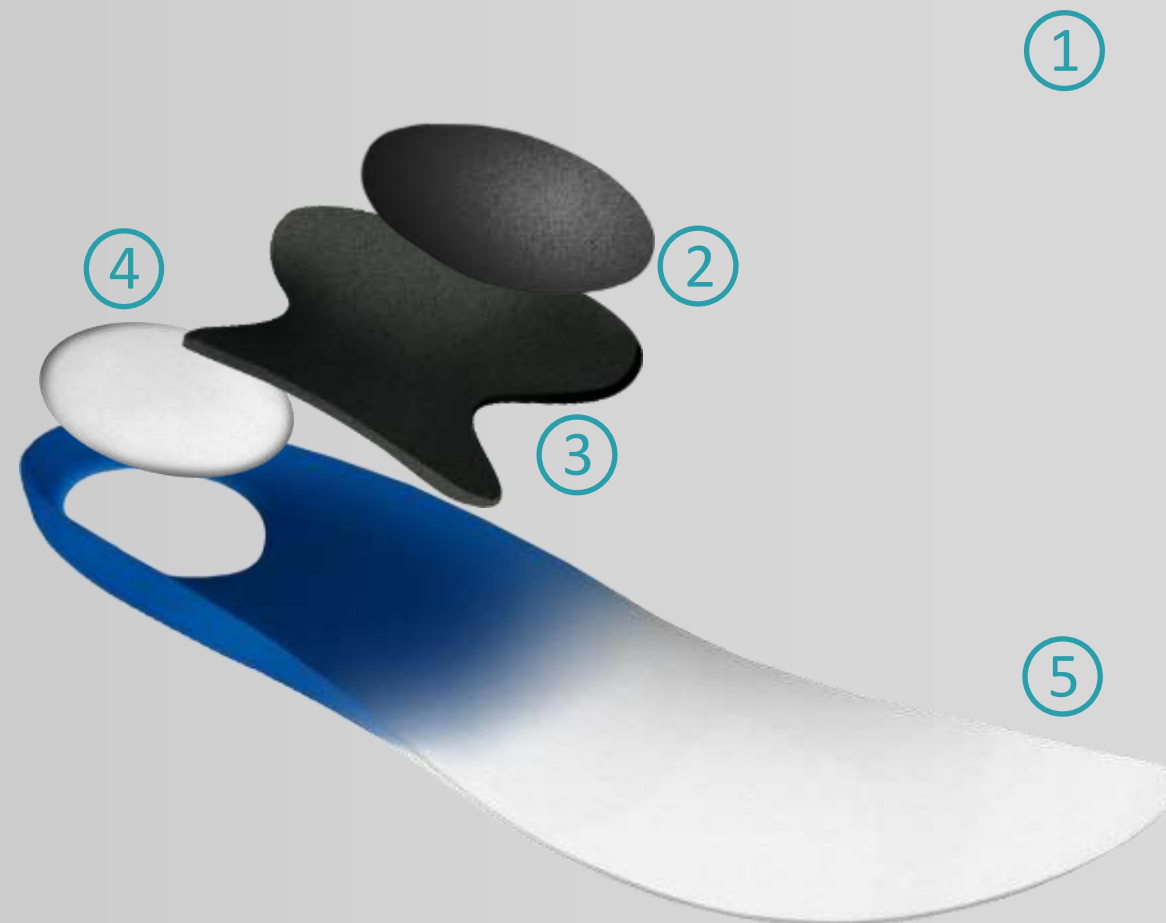



OMP-961

ПОКАЗАННЯ:

Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I та II ступеня

Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня

Hallux Valgus («кісточка»), вальгус та варус стопи, метатарзалгії

Плантарний фасциїт, центральна п'яткова шпора та артрит

Молоткоподібні деформації пальців та ахілобурсит

Деформація Тейлора, неврома Мортоната та хвороба Хаглунда

Артрози, захворювання хребта, цукровий діабет

Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках



Устілки ортопедичні амортизуючі ПРЕМІУМ

 **OMP-974**

PRO


Розміри: **35-48**

  Унісекс



OMP-974

- 1 ПОКРИТТЯ: мікрофібра бежевого кольору**
Відводить вологу, пропускає повітря, має протиковзкий ефект
- 2 ВАЛИК ЗЕЙЦА: м'який, менш виражений, пінополіуретан, жорсткість 30-35°**
Підтримка поперечного зводу стопи, знімає навантаження з переднього відділу стопи
- 3 Пронатор стопи**
Підтримує поперечні та поздовжні зводи стопи в анатомічно правильному положенні
- 4 КАРКАС: металевий стрижень**
Розвантажує м'язи гомілки і ахіллове сухожилля
- 5 ОСНОВА: пінополіуретан білий, жорсткість 30-35°**
Розвантажує суглоби ніг, хребет, п'яти та великі пальці
- 6 МАСАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ: пінополіуретан білий, жорсткість 30-35°**
Мікромасаж пальців ніг
- 7 П'яткові бортики**
Забезпечують фізіологічно правильне розташування п'яти

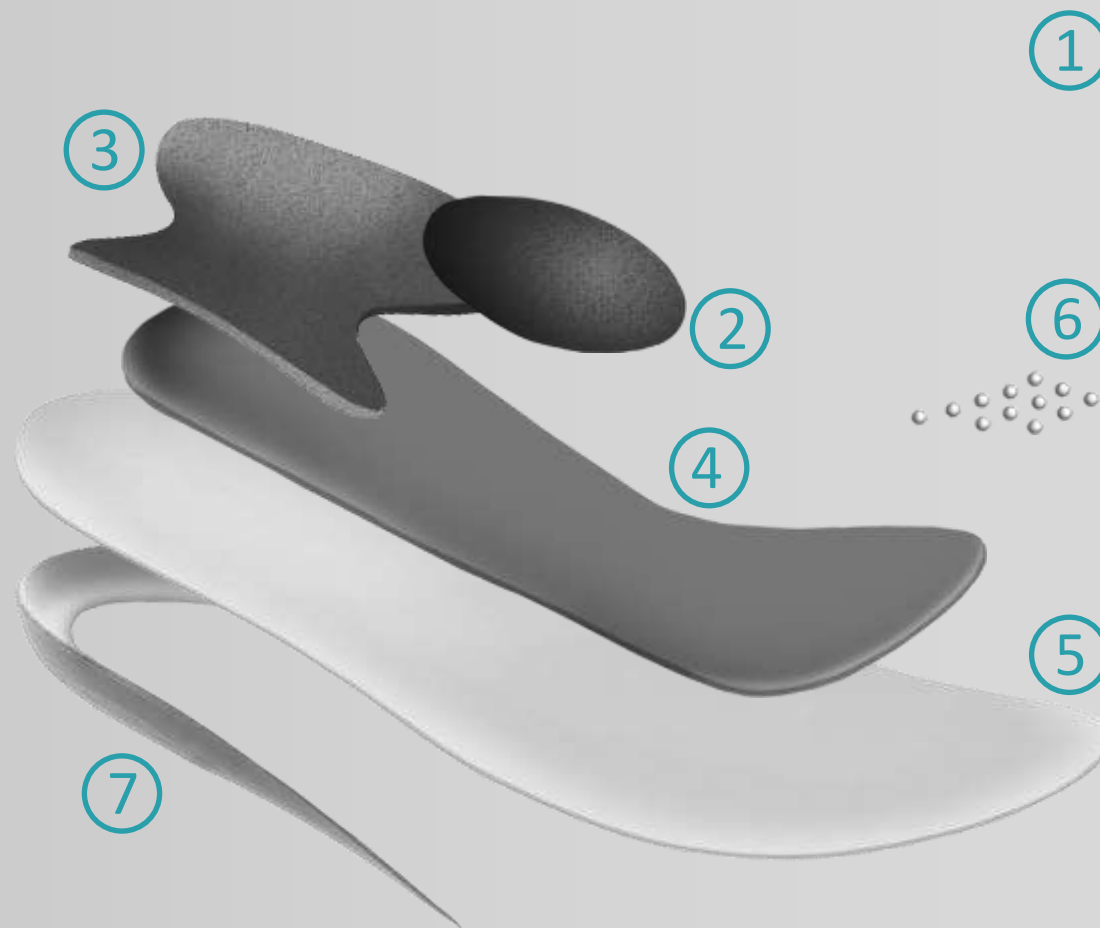



OMP-974

ПОКАЗАННЯ:

Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня

Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня

Hallux Valgus («кісточка»), вальгус та варус стопи, метатарзалгії

Плантарний фасциїт, п'яткова шпора та артрит

Молоткоподібні деформації пальців

Деформація Тейлора, неврома Мортон та хвороба Хаглунда

Захворювання хребта та варикозне розширення вен

Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках

Центральна п'яткова шпора та варикозне розширення вен




Устілки ортопедичні ПРЕМІУМ

 OMP-975

S P O R T

Розміри: 35-48


  **Унісекс**

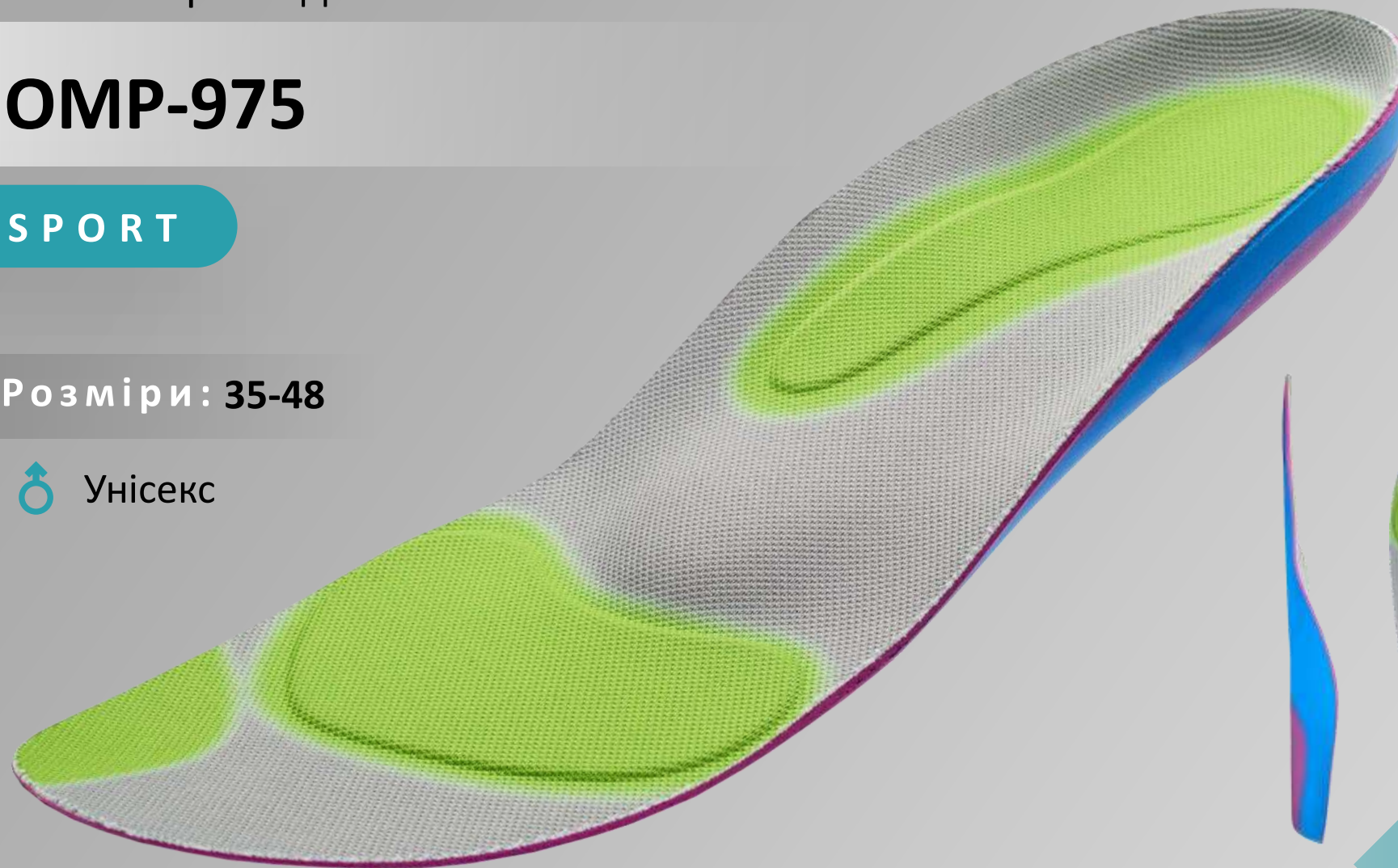

ОМР-975

- ① **ПОКРИТТЯ: спорт текстиль**
Відводить вологу та дихає, має протиковзкий ефект
- ② **ВАЛИК ЗЕЙЦА: менш виражений**
Підтримка поперечного зводу стопи, знімає навантаження с переднього відділу стопи
- ③ **ЗОНИ РОЗВАНТАЖЕННЯ:**
П'яти, великого пальця, та 4. передніх відділів стопи
- ④ **Спеціальний елемент в ділянці носка**
Розвантажує великі пальці стопи та плюсни
- ⑤ **ПРОНАТОР СТОПИ**
Підтримує поперечні та поздовжні зводи стопи в анатомічно правильному положенні
- ⑥ **ОСНОВА: пінополіуретан фіолетовий, жорсткість 13-19°**
Розвантажує м'язи гомілки, ахіллове сухожилля, суглоби нижніх кінцівок і хребет
- ⑦ **П'ЯТКОВІ БОРТИКИ**
Встановлюють п'яти в анатомічно правильне положення. Корегують статичну недостатність стоп і п'яткові шпори. Розвертають і фіксують п'яткову область при нефіксованих деформаціях
- ⑧ **ОСНОВА: пінополіуретан синій, жорсткість 40-45°**
Розвантажує м'язи гомілки, ахіллове сухожилля, суглоби нижніх кінцівок і хребет

Повноцінна ортопедична вкладка стопи. Підтримка поздовжнього та поперечного зводів стопи. При великих навантаженнях при ходьбі, спорті – зменшує ризик вивихів та травм.

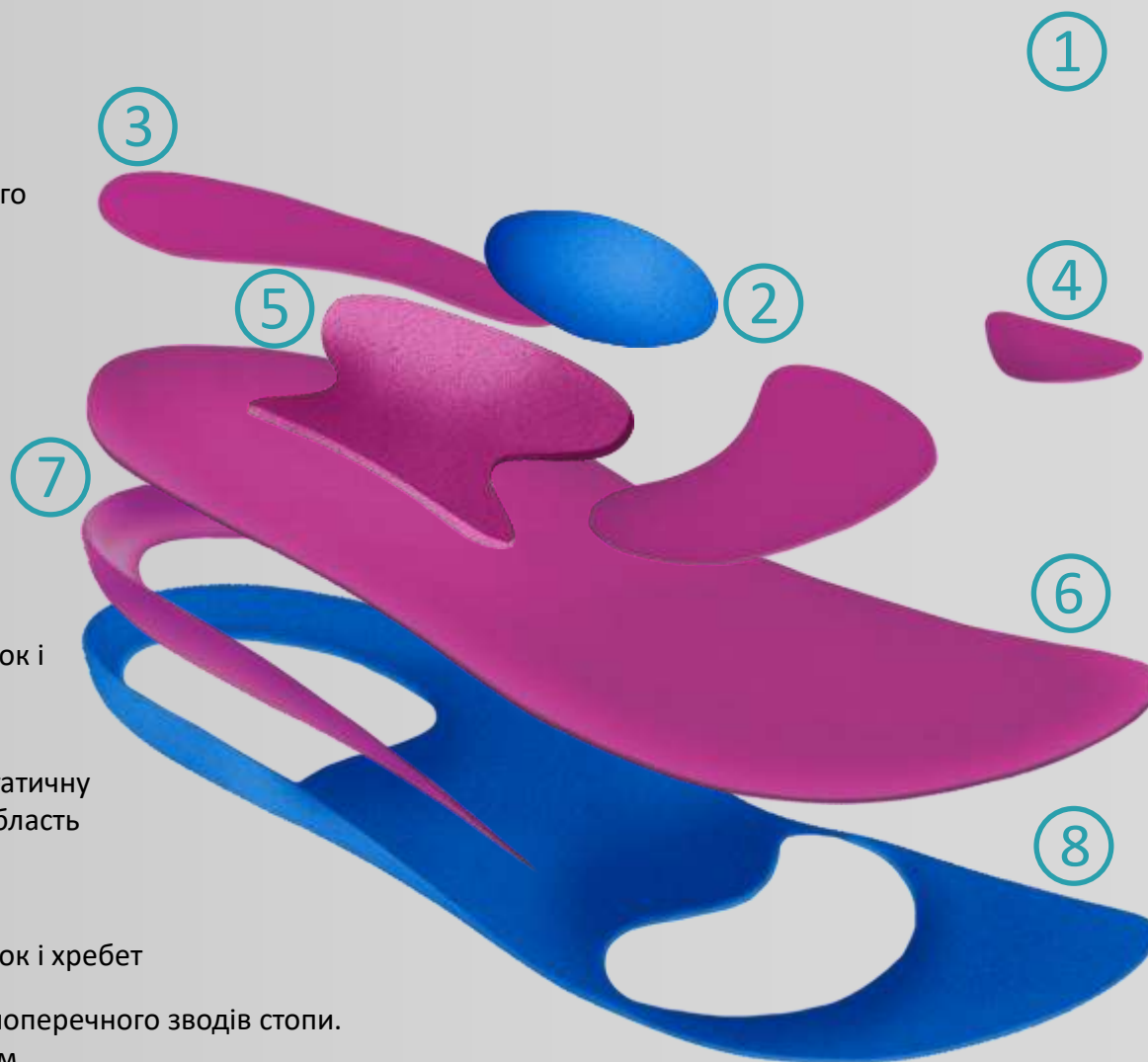



OMP-975

ПОКАЗАННЯ:

Нефіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість II ступеня

Фіксована поздовжня, поперечна, комбінована плоскостопість I ступеня

Hallux Valgus («кісточка»), вальгус та варус стопи, метатарзалгії

Плантарний фасциїт, п'яткова шпора та артрит


Молоткоподібні деформації пальців та ахіло бурсит

Деформація Тейлора, неврома Мортонна та хвороба Хагlund

Захворювання хребта, подагра та артрози

Реабілітація після травм та оперативних втручань на нижніх кінцівках

Вагітність, варикозне розширення вен, для занять спортом

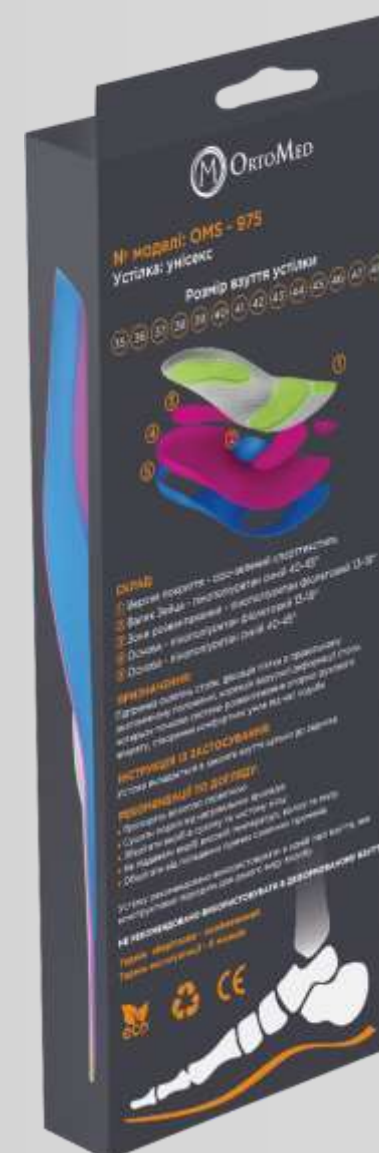


Устілки дитячі ортопедичні з бортиком ПРЕМІУМ

 **OMP-5538**

KIDS


Розміри: 22-39

  Унісекс

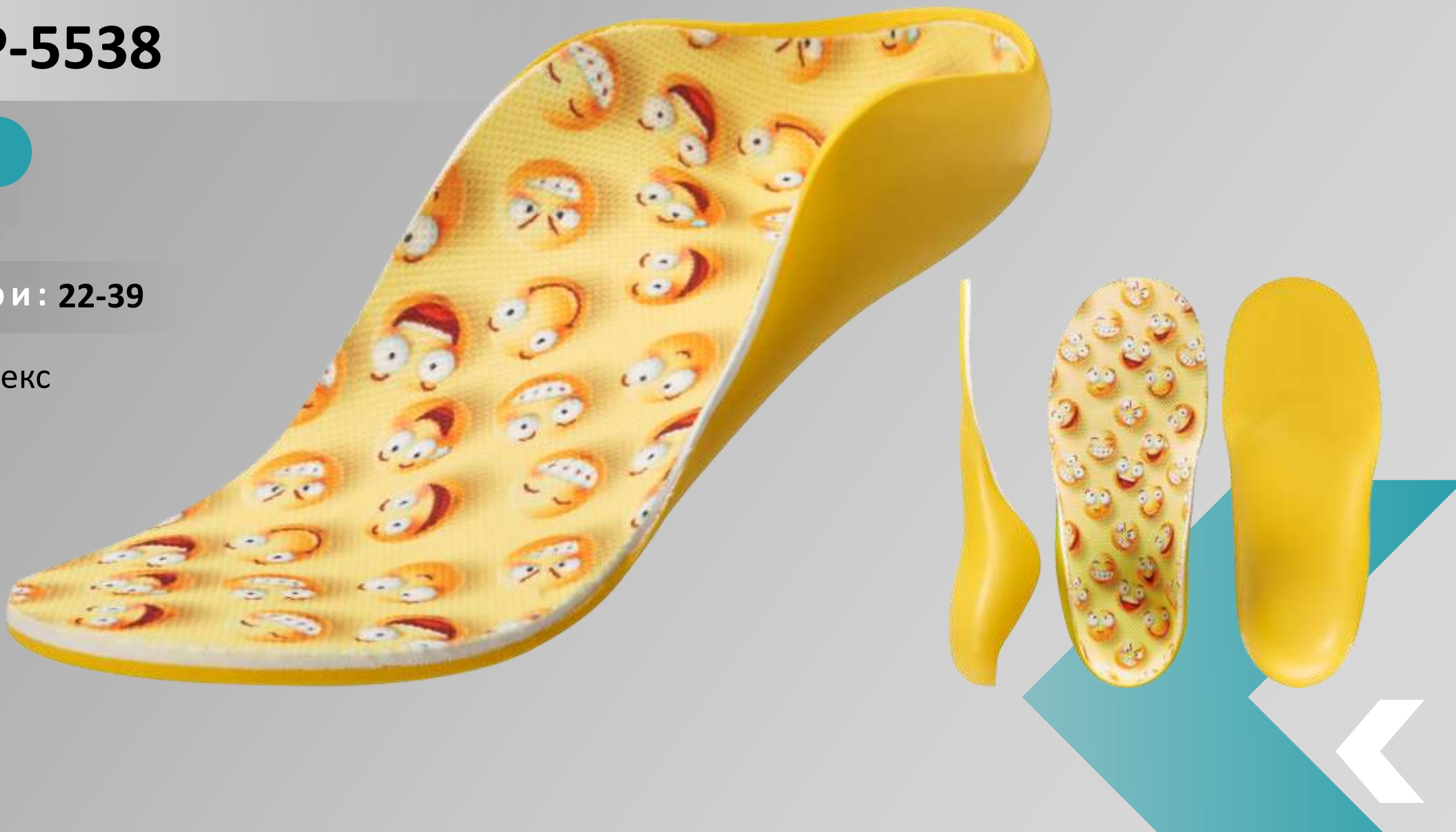

OMP-5538

- 1 ПОКРИТТЯ: текстиль, м'який, гіпоалергенний**
Поглинає вологу, повітрепроникний матеріал, що дихає. Має протиковзкий ефект
- 2 ОСНОВА: жорстка EVA білий 2 мм, жорсткість 25-30°**
Пружна каркасна основа з високими бортиками, подовженими на 2/3 устілки. Амортизує та зменшує навантаження на суглоби ніг і хребет. Підтримка поздовжніх склепінь стопи дитини
- 3 КАРКАС: посилені супінатори 1 мм та 1,3 мм**
Розвантажують п'ятки, суглоби нижніх кінцівок, хребет, м'язи, зв'язки та сухожилля стоп
- 4 Високі пронататори стопи**
Щільно фіксують стопи
- 5 П'яткові бортики**
Глибока чаша п'яти для відмінної підтримки п'яти
- 6 Нижня частина:**
EVA жовтий, рожевий, синій 2 мм, жорсткість 25°

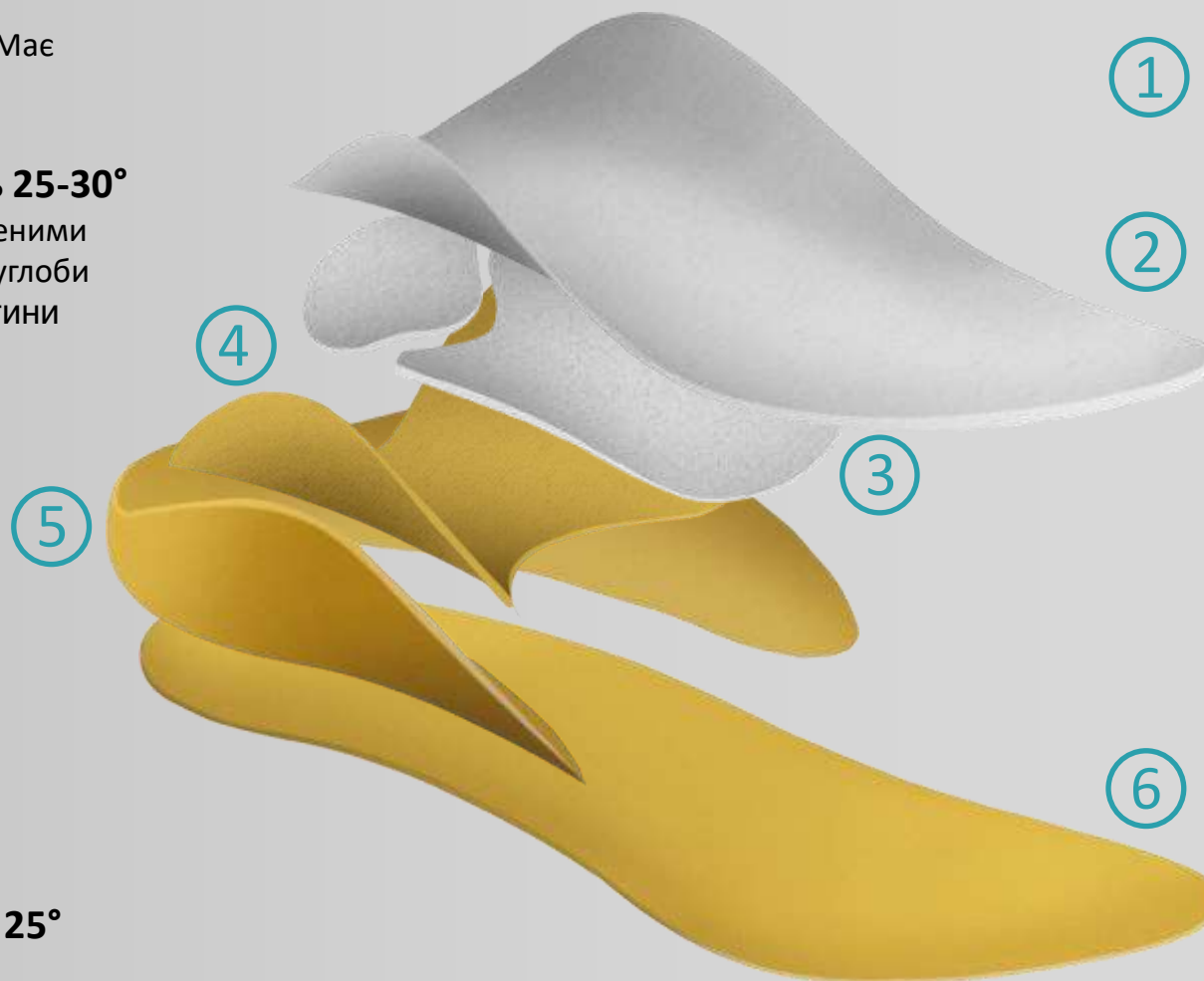



OMP-5538

ПОКАЗАННЯ:

Вальгусні та плоско-вальгусні нефіксовані деформації стопи, в тому числі в поєднанні з вальгусом або варусом заднього та середнього відділів стопи

Реабілітація після травм та оперативних втручань на стопі

Одночасна корекція нефіксованих деформацій стопи




Рекомендації з використання



Догляд за устілками:

- протирати вологою серветкою
- сушити подалі від нагрівальних приладів
- зберігати виріб в сухому та чистому місці
- не піддавати виріб високій температурі, волозі та пилу
- оберігати від прямих сонячних променів
- провітрювати після використання

Устілка вкладається в закрите взуття щільно до задника
Не рекомендується використовувати в деформованому взутті

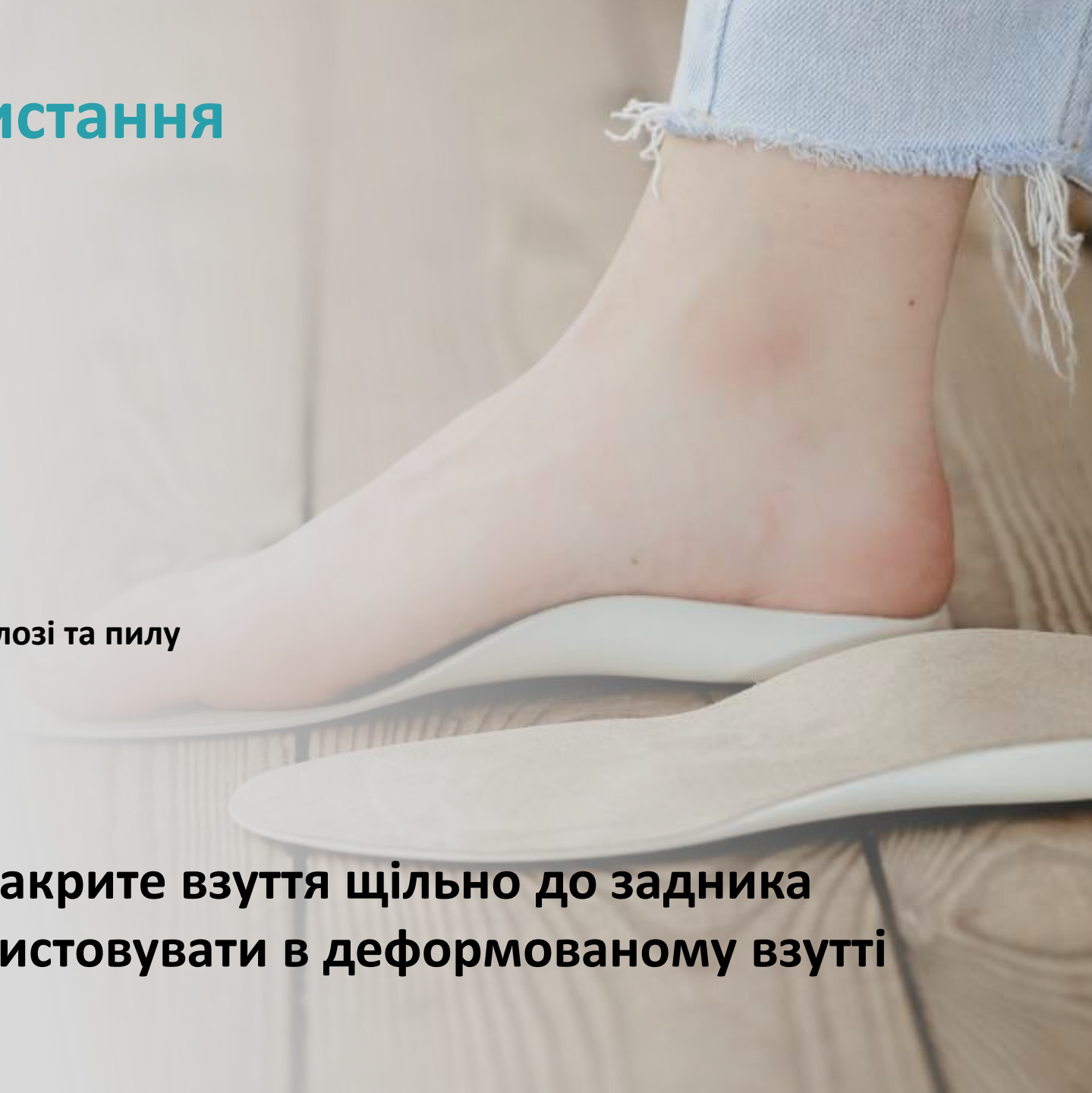



Orthopädische Systeme GmbH

КОМПАНІЯ НЕМА ЦЕ:

Досвід у виготовленні ортопедичних устілок з 1995 року

Сертифікація EU MDR 2017/745

Преміальні німецькі матеріали

Розробка лікарів-ортопедів

Сучасне високотехнологічне виробництво

Контроль якості кожної пари устілок на всіх етапах виробництва



Ортопедичні устілки OrtoMed

«Легкою ходьбою – тільки вперед!»

Раді співпраці з Вами!

🏢 ТОВ «ОртоМед Холдинг»

🌐 omh.com.ua

📍 Київ, вул. Автозаводська 54/19

✉ sales@omh.com.ua

☎ +38 044 502 23 77

☎ +38 067 539 37 03

